

# BALANCE

Stabilité, positionnement, confort et protection de la peau



## Un positionnement optimal - votre équilibre

Le coussin Jay Balance offre un niveau de protection de la peau très élevé, ainsi qu'une stabilité et un confort optimal.

Ses caractéristiques améliorées telles que la couche de mousse souple et la largeur du contour préviennent du phénomène de décubitus. La poche de fluide repensée et le double système de housse quant à eux protègent efficacement la peau.


Une stabilité et une position optimales sont possibles grâce aux nouveaux contours du coussin, qui prend encore mieux en compte la forme du corps. Les cales de positionnement qui peuvent être ajoutées à la housse interne permettent de répondre aux besoins et à la position spécifiques de l'utilisateur.





## Mousse multi-densité pour le contour

Le Balance est équipé d'une couche de mousse préformée souple, posée sur une structure à cellules ouvertes. La pression sur la peau est ainsi réduite, ce qui apporte du confort et une position tout à fait optimale du point de vue anatomique.

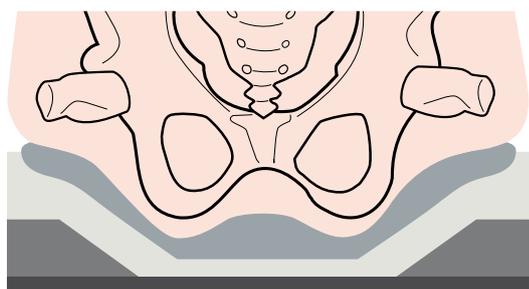

Le contour permet une répartition optimale de la pression entre la cuvette ischiatique et les trochanters. Il offre une stabilité frontale, arrière et latérale pour un bon positionnement, une immersion optimale et une excellente répartition du poids. La peau est ainsi protégée du risque de décubitus. En outre, le coussin fluide permet de réduire à néant les effets de cisaillement.



## Inserts fluide ou air

L'insert est un élément essentiel du coussin : il enveloppe les proéminences osseuses du bassin, optimisant la répartition des pressions et maintenant l'intégrité de la peau.

Le Balance est disponible avec un insert fluide ou air, s'adaptant à la morphologie de chaque individu. Les inserts s'adaptent à la position assise, permettent une bonne répartition du fluide ou de l'air sous les extrémités osseuses saillantes et aident la peau à se protéger du décubitus.



La conception sans entretien des nouveaux coussins fluides permet un résultat optimal pendant toute la durée de vie du coussin.



Les inserts air offrent la possibilité de régler les chambres à air afin de pouvoir corriger les positions asymétriques.



## Options de positionnement

Grâce aux cales de positionnement, le bassin et les cuisses peuvent être placés de manière correcte. La tolérance à la position assise en est accrue et peut être adaptée lorsque les besoins de l'utilisateur changent.



## Un système de housse innovant

- Facile et offrant une protection optimale grâce au système de double housse. La technologie innovante de la housse interne et externe offre un équilibre parfait entre la matière micro-climatique et une gestion efficace de l'incontinence.
- La housse interne est imperméable, facile à retirer et à nettoyer, tandis que sa fermeture éclair et ses coutures Aqua-Gard garantissent une base de mousse toujours sèche.
- La housse externe micro-climatique dissipe la chaleur et l'humidité pour une protection supplémentaire de la peau. Le Balance est également disponible avec une housse stretch ou incontinence.
- Des cales de positionnement peuvent être facilement ajoutées sans créer de tensions de surface au niveau de la housse du coussin. Le risque de décubitus est également réduit.



Fermeture éclair et coutures Aqua-Gard



Housse incontinence



Housse micro-climatique



Housse stretch

Prof. cm	Largeur										
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	56	60
34	■										
36	■	■									
38	■	■	■								
40	■	■	■	■							
42	■	■	■	■	■						
44	■	■	■	■	■	■					
46	■	■	■	■	■	■	■				
48	■	■	■	■	■	■	■	■			
50	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
56										■	■
60										■	■

cm	Hauteur du coussin		
	Avant	Arrière	Hauteur maximale
cm	8.5	8.5	8.5

Poids du coussin • 40x46 cm avec insert air : 1,9 kg  
 Poids du coussin • 40x46 cm avec insert fluide : 2,4 kg  
 Poids maximum de l'utilisateur • LA 34 - 50 cm : 136 kg  
 Poids maximum de l'utilisateur • LA 56 - 60 cm : 225 kg  
 Garantie: 2 ans



**Sunrise Medical B.V.**

Groningenhaven 18-20  
3433 PE Nieuwegein  
The Netherlands

T: +32 (0)800 - 24 800  
E: [info@sunrisemedical.be](mailto:info@sunrisemedical.be)

[www.SunriseMedical.be](http://www.SunriseMedical.be)